



# التعليقات


تحتوي مجموعة أدوات أخذ العينات على:

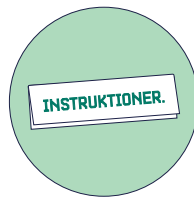


التعليمات

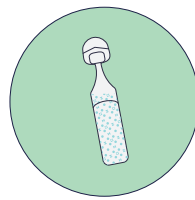


أنبولة بها محلول ملحي

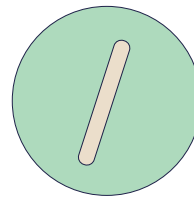


خافض اللسان

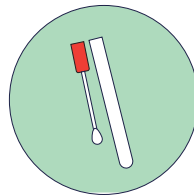

عصا أخذ العينات/الماسحة

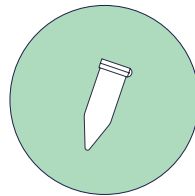

كيس قابل للغلق

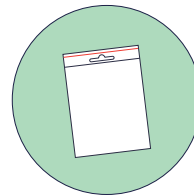

أنبوب اللعاب



مرحبًا! إن مجموعة أدوات أخذ العينات هذه تم تصميمها من قبل ديناميك كودز DYNAMIC CODES المخصصة لكوفيد-19. يستغرق عملية أخذ العينات بضع دقائق فقط ثم يتم إرسالها إلى مختبرنا لتحليله. سيقوم مقدم الرعاية الصحية بالاتصال بك عندما تكون نتائج الاختبار جاهزة. نصائح! إذا لم تُنح لك إمكانية الوصول إلى مرآة و/أو إضاءة جيدة، يمكنك استخدام هاتفك المحمول كمرآة عن طريق تصوير نفسك بالكاميرا الأمامية، أو كإضاءة باستخدام مصباح الصور بالهاتف المحمول.



## 1. اقرأ التعليمات

ابدأ بتعقيم يديك بالكحول. اقرأ التعليمات بالكامل قبل أن تبدأ بإجراء الاختبار، حتى لا تفوت أي شيء مهم.




## 2. تحقق من البيانات

أخرج أنبوب العينة وعصا أخذ العينات/الماسحة وتحقق من صحة بياناتك الشخصية على الملصق.



## 3. اشطف الأنف بالمحلول الملحي

(A) إذا كان لديك رشح، فقم بتنظيف أنفك من المخاط أولاً. (B) قم بفك الغطاء الموجود أعلى أمبولة المحلول الملحي. قم بإمالة رأسك للخلف وقطر حوالي نصف المحلول في كل فتحة من فتحتي أنفك. قم بتقطير الكمية المتبقية في فتحة أنفك الأخرى. اتركه يعمل لفترة قصيرة (10-15 ثانية) ثم اترك المحلول يمر عبر الحلق عن طريق البلع.

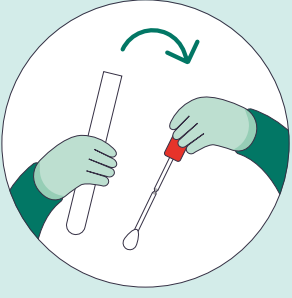


## 4. التحضير لأخذ عينات الحلق

(A) أخرج أنبوب الاختبار وعصا أخذ العينات/الماسحة. (B) تأكد من أن لديك مرآة أو هاتفًا محمولًا مزودًا بكاميرا أمامية لتتمكن من النظر إلى أسفل الحلق. (C) قم بإزالة غطاء أنبوب الاختبار وتذكر ألا تلمس الجزء الناعم من عصا أخذ العينات/الماسحة.



## 5. خذ عينة من اللوزتين وجدار الحلق

(A) انظر في المرآة. قم بإمالة رأسك للخلف قليلاً وافتح فمك بأقصى درجة للحصول لكي تتمكن من رؤية اللوزتين بشكل واضح. (B) استخدم الملعقة لإبعاد اللسان عن الجزء الخلفي من الفم. (C) قم بفرك عصا أخذ العينات/الماسحة على اللوزتين على جانبي الحلق لمدة 5-7 ثوان. حاول تجنب لمس أجزاء أخرى من الفم.

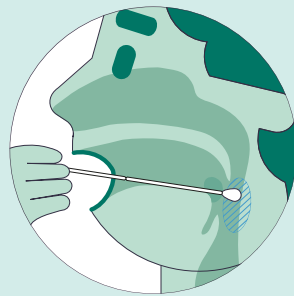


## 6. خذ عينة من الأنف

(A) أدخل الجزء الناعم من عصا أخذ العينات/الماسحة 2-3 سم في إحدى فتحتي الأنف وقم بلمسها على جدار الأنف لمدة 5-7 ثوان. (B) كرر عملية أخذ العينات بنفس الطريقة في فتحة الأنف الأخرى. (C) انتقل إلى الخطوة 7 دون خفض عصا أخذ العينات/الماسحة.




## 7. غمس عصا أخذ العينات/الماسحة في اللعاب

(A) أخرج أنبوب عينة اللعاب وافتح الغطاء. (B) قم بالصبق 2-3 مرات في أنبوب عينة اللعاب. (C) اغمس عصا أخذ العينات/الماسحة في اللعاب وقم بلفها بضع لفات. (D) تخلص من أنبوب عينة اللعاب. (E) انتقل إلى الخطوة 8 دون خفض عصا أخذ العينات/الماسحة.

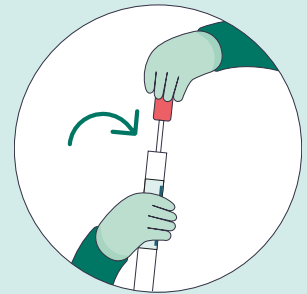

## 8. ضع السدادة الفلينية

ضع عصا أخذ العينات/الماسحة مرة أخرى مباشرة في أنبوب الاختبار واضغط على الغطاء بقوة.

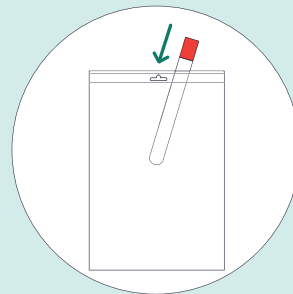

## 9. قم بوضع العينة في الكيس

ضع أنبوب العينة وعصا أخذ العينات/الماسحة في الكيس القابل للغلق وأغلقه.



## 10. تخلص من المواد الأخرى

تخلص من أنبوب عينة اللعاب وخافضة اللسان وأمبولة المحلول الملحي عن طريق إلقائهم في القمامة المنزلية العادية. لا يتم تسليم هذه الأشياء مع العينة.



## 11. قم بتسليم العينة وانتظر النتائج

قم بتسليم العينة إلى الموظفين في موقع أخذ العينات. سوف تتلقى نتائج الاختبار عن طريق الموقع الإلكتروني WWW.1177.SE بمجرد أن يتم تحليلها وجاهزيتها.