



# إرشادات


## تحتوي مجموعة أخذ العينات على:

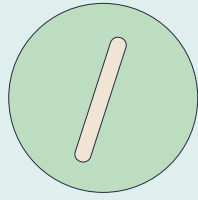


خافض اللسان

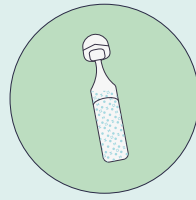


أمبولة محلول ملحي  
من كلوريد الصوديوم  
بنسبة تركيز ٩٪

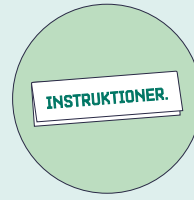


إرشادات

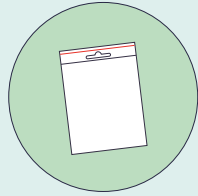

كيس مغلق

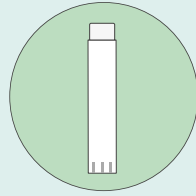

أنبوب اختبار اللعاب

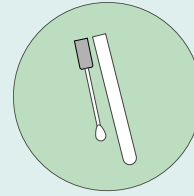

أنابيب اختبار مع  
عصا أخذ العينات



Dynamic Code AB  
Fridtunagatan 24  
582 13 Linköping

تمت مراجعة هذا الدليل  
وصدر في 2021-06-29

عرض  
نتائج الاختبار.

الحساسية: ٩٥,٧٪

النوعية: ٩٩,١٪

الحماية: ٩٧,٨٪



مجموعة العلامة CE  
لأخذ العينات الذاتية



تحليل PCR  
في معمل مضمون  
الجودة



النتائج


مرحبًا! هذه هي مجموعة أخذ العينات الذاتية لفحص الإصابة بفيروس كوفيد-19 من شركة Dynamic Codes. يستغرق أخذ العينات بضع دقائق فقط ثم يتم إرسالها إلى مختبرنا لتحليلها. ستوضح نتائج الاختبار أيضًا ما إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا للملازمة التنفسية الحادة (سارس-كوف-2) أم لا. يمكنك الحصول على نتائج الاختبار على الموقع الإلكتروني se.1177. تعرف على الإجراءات الخاصة بمنطقتك على se.1177.

بعد أخذ العينة، يجب تقديمها في نفس اليوم. اقرأ التعليمات كاملة قبل أن تبدأ في أخذ العينة، حتى لا تفوت أي شيء مهم. يجب أخذ العينة على الفور بعد فتح مجموعة أخذ العينات. في حالة تلف مادة أخذ العينات، يجب عدم استخدامها. واتصل بدلاً من ذلك بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على مجموعة جديدة لأخذ العينات الذاتية. يمكن الاعتماد على نتائج الاختبار فقط إذا تم إجراء الاختبار بشكل صحيح وفقًا للإرشادات. يجب أن تكون المجموعة في درجة حرارة الغرفة وقت أخذ العينات. يوصى باستخدامها بداية من 13 عام. بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-12 عامًا، يجب أن يتم أخذ العينات من قبل ولي الأمر أو أخصائي الرعاية الصحية. أما بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-5 سنوات، يجب أن يتم أخذ العينات من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية.



## 1. اقرأ الإرشادات

ابدأ بغسل اليدين وتجفيفهما جيدًا أو تنظيفهما بالكحول.  
اقرأ التعليمات كاملة قبل أن تبدأ الاختبار، حتى لا تفوت أي شيء مهم.

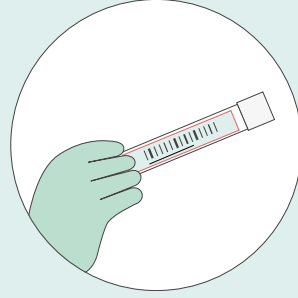


## 2. تحقق من صحة البيانات

أخرج أنبوب الاختبار باستخدام عصا أخذ العينات وتحقق من صحة بياناتك الشخصية على الملصق.  
إذا كانت البيانات غير صحيحة، يرجى الاتصال بالمكان الذي قمت بتسليم العينات الخاصة بك فيه.




## 3. اشطف أنفك بمحلول ملحي

أ) إذا كنت تشعر بوجود مخاط، نظف أنفك أولاً.  
ب) عليك بإزالة الغطاء الموجود أعلى عبوة المحلول الملحي. قم بإمالة رأسك للخلف وقطر حوالي نصف المحلول في فتحة واحدة من الأنف. ثم عليك بتقطير الكمية المتبقية من المحلول في فتحة الأنف الأخرى.  
اتركه لفترة قصيرة (10-15 ثانية) ثم اترك المحلول يمر عبر الحلق عن طريق البلع.

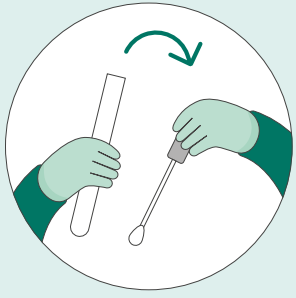


## 4. التحضير لأخذ العينة الخاصة

أ) أخرج عصا أخذ العينات من أنبوب الاختبار.  
ب) تأكد من أن لديك مرآة أو هاتفًا محمولًا به كاميرا لتتمكن من النظر إلى أسفل الحلق.  
ج) ارفع غطاء أنبوب الاختبار واحرص على عدم لمس الجزء الناعم من عصا أخذ العينات.

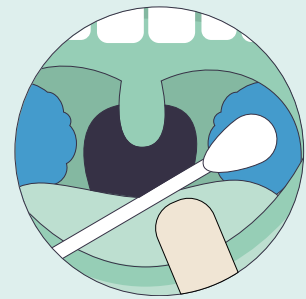


## 5. خذ العينة من اللوزتين والبلعوم

أ) انظر في المرآة. عليك بإمالة رأسك للخلف قليلاً وافتح فمك للنهاية للحصول على صورة واضحة للوزتين.  
ب) استخدم الخافض لإبعاد اللسان عن مؤخرة الفم.  
ج) امسح بعصا أخذ العينات على اللوزتين على جانبي الحلق لمدة 5-7 ثوان. حاول أن تتجنب لمس أجزاء أخرى من الفم.  
إذا كنت قد خضعت لعملية جراحية لإزالة اللوزتين، فامسح الجزء المقابل على جانبي الحلق.

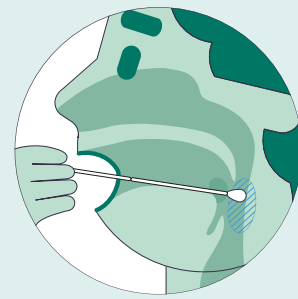


## 6. خذ عينة من الأنف

أ) ادخل الجزء الناعم من العصا لمسافة 2-3 سم في فتحة أنف واحدة وقم بتدويرها على جدار الأنف لمدة 5-7 ثوان.  
ب) كرر أخذ العينة بالطريقة نفسها من فتحة الأنف الأخرى.  
تذكر تعديل مسافات أخذ العينات من الأنف في حالة الأطفال. بالنسبة للبالغين، يمكن اعتماد مسافة 2-3 سم، ولكن بالنسبة للأطفال قد تحتاج إلى تقليل المسافة، بناءً على حجم الطفل.  
ج) تابع إلى الخطوة 7 دون وضع عصا أخذ العينات.

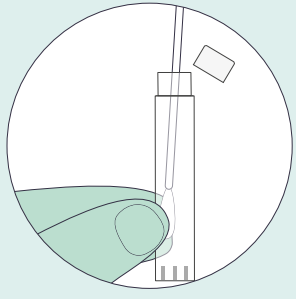


## 7. جهز عينة اللعاب

أ) أخرج أنبوب اختبار اللعاب وافتح الغطاء.  
ب) ابصق 2-3 مرات في أنبوب اختبار اللعاب.  
ج) اغمس عصا أخذ العينة في اللعاب وقم بتدويرها بضع لفات.  
د) تخلص من أنبوب اختبار اللعاب.  
هـ) تابع إلى الخطوة 8 دون وضع عصا أخذ العينات.

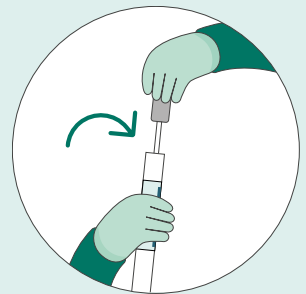


## 8. ضع الغطاء

ضع عصا أخذ العينات مرة أخرى مباشرة في أنبوب الاختبار واضغط على الغطاء بقوة.

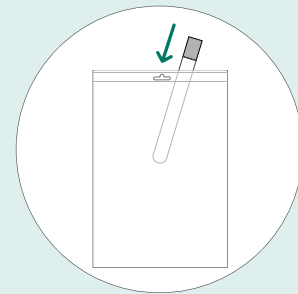

## 9. حزم العينة

ضع أنبوب الاختبار وعصا أخذ العينات في الكيس ذو السحاب واطبقه.  
احتفظ بالكيس مع المحتويات في التلاجة حتى تقدم الاختبار. وهو الأمر الذي يجب عليك القيام به في اليوم نفسه.

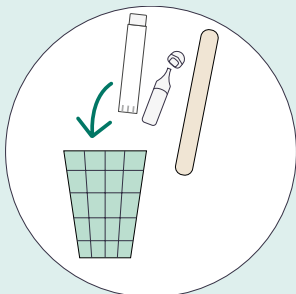

## 10. تخلص من المواد المتبقية

تخلص من أنبوب اختبار اللعاب وخافض اللسان والمحلول الملحي في النفايات المنزلية العادية. هذه المواد لا توضع مع العينة.



## 11. قدم العينة وانتظر النتائج

ارسل العينة في اليوم نفسه إلى المكان الذي يتم فيه جمع العينات.  
في حالة الحصول على مجموعة أخذ العينات من الصيدلية، يرجى الاستعانة بشخص / ممثل لا تظهر عليه الأعراض كي تستلمها منه.  
ستحصل على نتائج الاختبار على se.1177 في غضون ثلاثة أيام. إذا لم تحصل على النتائج بعد ثلاثة أيام، يجب عليك طلب عمل اختبار جديد والإبلاغ عن عدم استلام نتائج الاختبار على موقع الخدمات 1177 للعبئة الإلكترونية.